

4531661035088

Dream

(発売元) ドリーム
株式会社
愛知県名古屋市中区徳川町403
1-C・Cクオリティビル
お客様相談室 0120-559-553
URL <http://www.mydream.co.jp/>



レッグタイプ (O・X脚歩行、股関節、骨盤周り、腰、ひざ、足首) スリムメンテ・スパイラルベルト 取扱説明書



ご使用になる前に、本書を必ずお読みください。また、必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。

一日5分から。くると巻いて動くだけ。身体のゆがみは、「ねじれ」ながら進む。だから、ねじり戻す方式のベルト。気になる下半身や歩行を美しく整えます。

- 【1】腰ベルト部 腰、骨盤、股関節、大腰筋、大臀筋、中臀筋の周囲を適度に加圧サポートします。
- 【2】連結ベルト部 スパイラル効果で、股関節から足首にかけての下半身のねじれをねじり戻すように力を加えます。
- 【3】足ベルト部[右・左] 連結ベルトを伸ばして巻き降ろしながら、ひざ下で固定し、足首から股関節までサポートします。

【使用方法】


- 通常は、下着の上にサポーターを着用し、その上からズボンをお履きください。また、ズボンの上からの着用もできます。
- 【図1】のように、左右の連結ベルトが左右対称に垂れ下がるように腰ベルトをお付けください。その際に、2つの足ベルトの右[赤のRの文字]と左[青のLの文字]を確認してください。
- 【図2】のように、連結ベルトを外側から後ろへ回して、【図3】のように引っ張りながら股の内側を通して、ひざの上に出します。
- 【図4】のように、連結ベルトをひざの裏に通して、足ベルトをひざの下にお付けください。
- もう一方の足も、左右対称になるように、外側から後ろに巻き降ろして、同じようにお付けください。
- ひざの下の、「R」「L」の文字の位置は、写真のように必ずしも正面ではなく、お客様の身体のサイズによって向きが変わります。



【図1】



【図2】

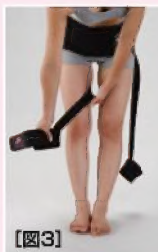

【図3】



【図4】

【使用上の注意】

- 【スリムメンテ・スパイラルベルト(レッグタイプ)】は、商品本来の目的以外での使用はおやめください。
- 使用中、使用後、お体に異常が見られる場合はただちに使用を中止して医師にご相談ください。
- 就寝時のご使用は、お避けください。
- ご使用後は、ベルトを装着した部位に跡が残る場合がございます。
- コンロ、ストーブなどの火気の近く、高温になる場所には置かないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れましたら中性洗剤で手洗いをしていただくと、きれいになります。

